

medilight® IR professional

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durchlesen!

ANWENDUNG

Infrarotstrahlung fördert ihr Wohlbefinden. Die Wärme dringt tief in das Gewebe und die Muskulatur ein.

Der Wärmestrahler sollte nicht zur medizinischen Heilbehandlung eingesetzt werden, außer auf Empfehlung Ihres Hausarztes!
Es besteht keine Zulassung nach Medizinproduktgesetz (MPG).

WARNHINWEIS: Das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen, um das Risiko von Feuer und Verbrennungen zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Dieses Gerät ist nicht bestimmt für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, sofern diese nicht beaufsichtigt werden oder ihnen Anweisungen hinsichtlich des Gebrauchs des Gerätes gegeben wurden, um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Diese Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen, um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es ausgetauscht werden durch die Reiher GmbH oder gleichwertige qualifizierte Personen, um ein Stromschlagrisiko zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination! Zur Vermeidung eines Stromschlagrisikos,

- das Gerät nicht in feuchten Umgebungen (z. B. im Badezimmer oder in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens) anwenden;
- kein Wasser in das Gerät laufen lassen.

WARNHINWEIS: Überprüfen, ob die am Gerät angegebene Spannung der örtlichen Netzspannung entspricht, bevor das Gerät angeschlossen wird, um das Risiko von Stromschlag oder dauerhafter Schädigung des Gerätes zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Wenn die für die Stromversorgung des Gerätes verwendete Wandsteckdose mangelhafte Anschlüsse aufweist, erwärmt sich der Stecker des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Gerätes in eine ordnungsgemäß installierte Wandsteckdose eingeführt wird, um das Risiko einer Beschädigung der Lampe zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Das Gerät im Fall eines Stromausfalls nach dem Gebrauch immer vom Netz trennen, um das Risiko einer Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

INBETRIEBNAHME

Das medilight® IR 288 ist als mobiles Gerät konzipiert. Wählen sie daher als Aufstellort eine geeignete Wand. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe leicht entzündbarer Gegenstände. **Der Abstand zu benachbarten Flächen muss mindestens 80cm betragen!** Entfernen Sie Brillen, Käämme und ähnliches aus dem Anwendungsbereich.

Schützen Sie die Augen vor der IR-Strahlung durch Schließen oder eine geeignete Augenabdeckung!

1. Kippschalter an der Gehäusevorderseite auf die Schalterstellung „0“ kippen.
2. Drehschalter an der Gehäusevorderseite auf die Schalterstellung „0“ drehen.
3. Kaltgerätesteckdose der Netzleitung in den IEC-Kaltgerätestecker an der Gehäuserückseite stecken.
4. Schutzkontaktstecker in eine zugelassene Schutzkontaktsteckdose, die den Leistungswerten des Gerätes entsprechen muss stecken (Bitte vorher prüfen!).

5. Zum Einschalten den Drehschalter von der Schalterstellung „0“ im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Behandlungszeit (plus 12min für Lüfternachlaufzeit) drehen.
6. Den Kippschalter in Stellung „I“ für die Bestrahlung mit zwei Infrarotlampen oder Stellung „II“ für die Bestrahlung mit vier Infrarotlampen. Das Gerät schaltet sich ein.

Vom eingestellten Zeitwert an läuft der Drehschalter mit Hilfe eines Zeitschaltwerkes automatisch wieder auf die Schalterstellung „0“ zurück.

Die eingestellte Bestrahlungszeit bitte **nicht** verkürzen, da dann der Lüfter nicht nachläuft, um das Gerät vor Überhitzung zu schützen.

Bei einer Einstellung der Betriebszeit von 120 min, verbleiben ca. 108 min für die Bestrahlung und 12 min sind für die Nachlaufzeit des Lüfters vorgesehen.

Lüfter darf nicht abgedeckt werden!
**Wärmestrahler unbedingt vor dem Berühren
abkühlen lassen!**
Halten Sie Kinder von dem Gerät fern!

BESTRAHLUNGSDAUER

Täglich ein- bis zweimal, nicht länger als jeweils 15 Minuten.

BESTRAHLUNGSABSTAND

mindestens 70 cm

PFLEGE, REINIGUNG, DESINFEKTION

Vor Reinigung des Gerätes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

Wischen Sie die äußeren Gehäuseteile mit einem feuchten Tuch ab, wenn der Wärmestrahler ganz abgekühlt ist. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder andere scharfe Reinigungsmittel.

WARTUNG

Die Infrarotlampen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 1000 Stunden.

Die 4 Infrarotlampen sind in zwei Lichtpaketen zu je 2 Stück verschaltet. Beim Ausfall einer Lampe funktioniert das jeweilige Lichtpaket nicht. Um eine gleichmäßige Lichtleistung zu gewährleisten, sollten immer alle 2 Lampen eines defekten Pakets gemeinsam gewechselt werden.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

LAMPENWECHSEL

Der Lampenwechsel darf nur von fachkundigem und vom Hersteller oder Vertreiber autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Vorgehensweise:

1. Vor dem Lampenwechsel das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
2. 8 Schrauben in der Rückwand lösen und entfernen. Rückwand abnehmen.
3. 6 Schrauben der Reflektoren lösen und entfernen. Reflektoren abnehmen.

4. 2 Schrauben des Fassungshaltebleches lösen und entfernen.
5. Lampen aus der Fassung entfernen. Neue Lampen in die Fassung einrasten.
Achtung: Nur vom Hersteller angegebene Lampen verwenden! Die Lampen beim Wechsel nicht mit der bloßen Hand berühren!
6. Für den Zusammenbau die Punkte 2. bis 4. in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
7. Netzstecker in die Steckdose stecken und das Gerät zum Überprüfen einschalten.

SICHERUNGSWECHSEL

Die Sicherung befindet sich in der Gehäuserückwand im IEC-Kaltgeräte-Stecker direkt über der Steckeröffnung und kann ohne Öffnung des Gerätes gewechselt werden.

Bei Sicherungswechsel das medilight® IR 288 ausschalten und die Zuleitung aus dem IEC-Kaltgeräte-Stecker an der Gehäuserückwand ziehen. Der rechteckige Sicherungshalter kann mit einem Schraubenzieher leicht angehoben und per Hand aus dem IEC-Kaltgeräte-Stecker gezogen werden.

Defekte Sicherungen dürfen nur durch Original-Sicherungen mit den gleichen Leistungswerten ausgetauscht werden. Nach dem Austausch wird der Sicherungshalter wieder in den Kaltgeräte-Stecker gesteckt und eingerastet.

VERANTWORTLICHKEIT DES HERSTELLERS

Wir als Hersteller betrachten uns nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Gerätes als verantwortlich, wenn:

- Änderungen oder Reparaturen ausschließlich durch von uns autorisiertem Personal vorgenommen werden
- die elektrische Installation des Raumes, in dem das Gerät zum Einsatz kommt, den Anforderungen der VDE 0107, bzw. der VDE 100 entspricht und
- das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

Der Betreiber muss in geeigneten Zeitabständen den Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Erdableitstrom und Leistungsaufnahme nach VBG 4 messen.

TECHNISCHE DATEN

Typbezeichnung:	medilight® IR 288
Nennspannung:	230V~
Nennfrequenz:	50-60 Hz
Nennleistung:	1414 W
Lampen:	4 x 350 W
Lampentyp:	Radium Ralotherm ITT 350/235-0170 350 W, 235 V, R7s
Sicherungen:	1 x M6,3 gemäß IEC 127
Schaltuhr mit Skalenfeld:	0 - 120 Minuten
Maße (BxHxT):	600 x 350 x 80 mm
Gewicht:	8,5 kg

KLASSIFIKATION

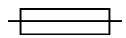
Schutzart:	Schutzklasse I
Schutzgrad gegen elektrischen Schlag:	Typ B
Schutzgrad gegen Feuchte:	abgedeckte Ausführung
Schutzgrad gegen explosionsfähige Gemische:	Das Gerät ist für den Gebrauch in Nähe von explosionsfähigen Gemischen nicht geeignet
Betriebsart:	Dauerbetrieb
Zubehör:	Netzleitung mit angeformtem Schutzkontaktstecker nach DIN 49441 und Europa-Kaltgeräte-Steckdose nach DIN 49457, 3 m Länge

BESCHREIBUNG DER BILDZEICHEN


- 0 : Ausschaltstellung
- I : Einschaltstellung für Betrieb mit zwei Infrarotlampen

II : Einschaltstellung für Betrieb mit vier Infrarotlampen

0...120 min : Zeitskala in Minuten

 : G-Schmelzsicherung

~ : Wechselstromzeichen

 : CE-Kennzeichnung



 : Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

GARANTIE

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät eine Garantie von **12 Monaten** ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind die Lampen und Verbrauchsmaterialien, sowie Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind oder bei Verwendung anderer als Original-Ersatzteile.

Garantieansprüche können nur bei Vorlage des Kaufbelegs geltend gemacht werden.

Bei Fehlern oder Problemen mit dem Gerät, sowie bei Hinweise oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertragshändler oder direkt an uns.

Transport-/Lagerbedingungen:

-10 °C bis + 50 °C

rel. Luftfeuchtigkeit max. 70%

Verpackung:

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung des Gerätes für eventuelle Rücksendung sicher auf. Sollte die Originalverpackung dennoch abhanden kommen, können Sie selbstverständlich eine Leerverpackung bei uns gegen Berechnung anfordern.

Anschrift:

Reiher GmbH

Saarbrückener Str. 254

D-38116 Braunschweig

Telefon: 0531/52081-82

Telefax: 0531/50 79 29

Email: info@reiher.de

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch nach Ablauf der Garantiezeit unsere Kundendienstleistungen an.

Fragebogen zur Kundenzufriedenheit

Kunde: _____

Kunden-Nr.: _____ Datum: _____



Wie beurteilen Sie die Lieferzeit von **TR Reiher**® ?

☺ sehr gut ☹ gut ☹ weniger gut Bemerkung: _____



Wie bewerten Sie unsere Lieferfähigkeit?

☺ sehr gut ☹ gut ☹ weniger gut Bemerkung: _____



Wie beurteilen Sie das Preis-/Leistungsverhältnis von **TR Reiher**® ?

☺ sehr gut ☹ gut ☹ weniger gut Bemerkung: _____



Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit und Service unserer Mitarbeiter?

☺ sehr gut ☹ gut ☹ weniger gut Bemerkung: _____



Wie gefallen Ihnen unsere **TR Reiher**® Produktinformation?

☺ sehr gut ☹ gut ☹ weniger gut Bemerkung: _____



Ihre persönlichen Wünsche oder Anregungen:

Unterschrift des Kunden

 Bitte zurücksenden an FAX Nr. (0531) 50 79 29